



小型恒温試験機 Aoba・Wakaba ご紹介パンフレット



Aoba・Wakaba 充実のラインナップ

日本試験機工業会の制定したJTM K12「温度試験槽及び温湿度試験槽の特性評価と校正に関するガイドライン」の制定を受け、当社でも試験槽校正のご要求にお応えする「性能保証」及び「再現性保証」を向上させた恒温試験機をラインナップ。お客様のご要望にお応え可能なサイズを取り揃えております。

優しくも
豪傑に



なんて和風な
出で立ち

繊細な
しなやかな

強制循環式恒温試験機


Aoba あおば

縦型モデル

- 新素材 SUS443J1使用。クロムを21%に高めて、SUS304と同等の優れた耐食性。だからサビにくい（内槽、棚板）。
- 断熱層を2重構造にする事により、外から熱を受けにくく、中の熱を外に出しにくいので、結果的にもれる熱量が少なく、空調負荷を低減します。
- 新構造「内槽背面吹き出し構造」背面全体を吹き出し循環構造にする事により、槽内温度分布を向上。

扉色
みどり or 白

VTEC-300

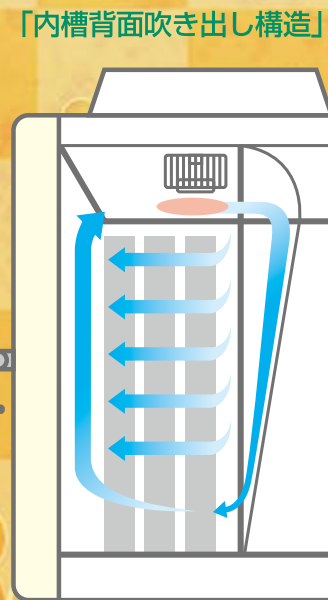

こだわりの曲線
まさにそれは“和”の考え方



強制循環式恒温試験機


Wakaba わかば（旧あおば）

横長ワイドモデル

- 新素材 SUS443J1使用。クロムを21%に高めて、SUS304と同等の優れた耐食性。だからサビにくい（内槽、棚板）。
- 断熱層を2重構造にする事により、外から熱を受けにくく、中の熱を外に出しにくいので、結果的にもれる熱量が少なく、空調負荷を低減します。
- 2段積みが可能となり、同時に温度別試験が可能。さらに、設置場所もとれません。

扉色
みどり or 白

VTEC-274

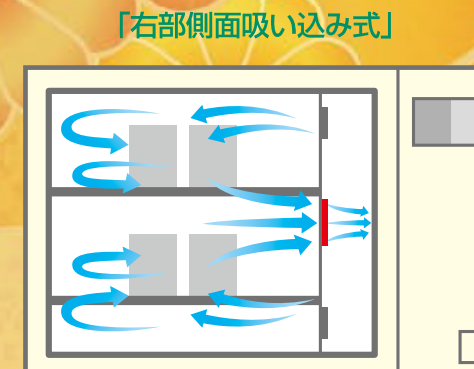

大切なこと
それは、熱風にさらされる
試料の気持ち



大は小を兼ねるという時代は終わりました。

試料の**大きさ**に合わせて**縦使い**、**横使い**をお選びいただけます。

用途に応じた効率性を考えて、
無駄のない恒温試験機を
ご提案致します。
それを可能にするのが
いすゞの豊富なラインナップです。



産業用恒温試験機
VTRL-2700-2T
〔電力〕 最大消費電力15.2kW

小さな試料なのに**大型**恒温試験機を使用していた...
これを**小型**恒温試験機**2台**にすることで!



(例) **Aoba** VTEC-300
あおば

〔電力〕 最大消費電力2台で6.4kW
8.8kWの消費電力カット!



(例) **Wakaba** VTEC-274
わかば

〔電力〕 最大消費電力2台で5.6kW
9.6kWの消費電力カット!

使い方いろいろ
大きさもいろいろ



全機種スペック等の詳細は総合カタログをご覧ください。

C Customer Care
A Active
P Presentation

試験に合わせたご提案をいたします。  **0256-46-2200**
まずは、コールセンターにお気軽にお問い合わせください。

- 恒温恒湿試験機 ■ 恒温試験機 ■ 省電力製品の生産
■ カスタマイズ生産 ■ 旧製品の受注生産



株式会社 いすゞ製作所

本社
ISUZU CAP 新潟 〒955-0151
新潟県三条市荻堀字藤平1397-42
TEL 0256-46-2200
FAX【代表】 0256-46-2601
FAX【コールセンター】 0256-46-2237

ISUZU CAP 関東 〒208-0004
東京都武蔵村山市本町2-1-6
第二古川ビル3F
TEL 042-569-6940
FAX 042-569-6941

ISUZU CAP 関西 〒564-0051
大阪府吹田市豊津町23-4 石田ビル101
TEL 06-6170-9892
FAX 06-6170-9893



(JQA-1638)
(本社・工場)

URL

<https://www.isuzuseisakusho.co.jp>

総合窓口

info@isuzuseisakusho.co.jp

お求め、お問い合わせは

※このカタログの一部あるいは全部を無断で複写複製する事を禁止します。
※このカタログの内容、仕様価格に関しましては将来予告なしに変更する事がございます。

HA220103000258-5